



Ajuste de irrigación

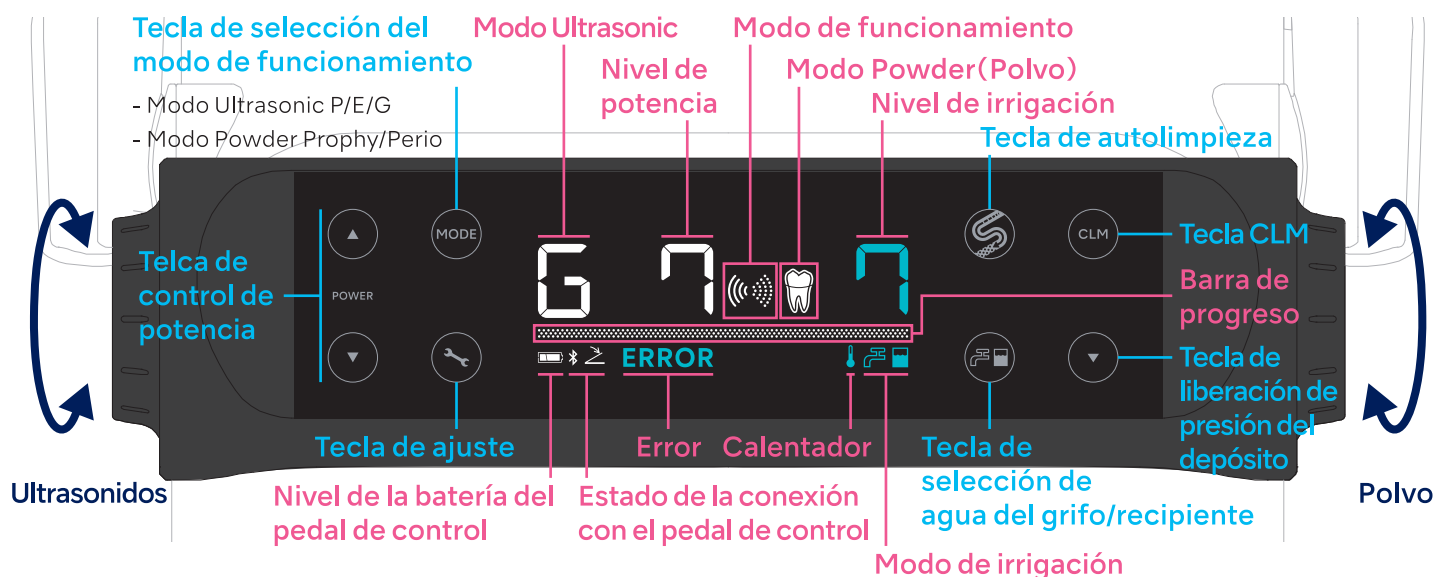


Pedal de control





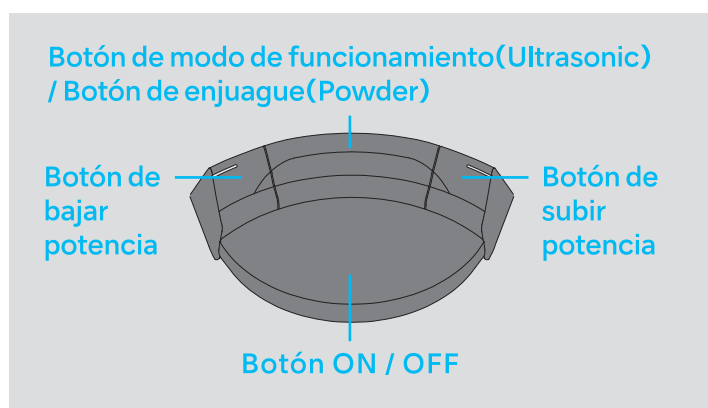


Utilizar o modo ultrassónico


- ① Sujete la pieza de mano ultrasónica. ② Seleccione el modo Ultrasonic (P/E/G). ③ Ajuste el nivel de potencia. ④ Seleccione el método de irrigación. ⑤ Ajuste del nivel de irrigación. ⑥ Pulse el botón ON / OFF

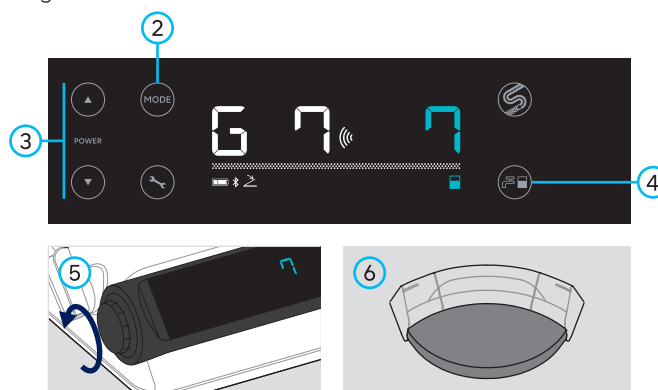

Uso del modo Powder

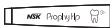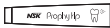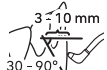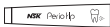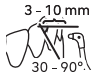
					
Modo	Depósito	Pieza de mano	Boquilla	Uso	Polvo
					
					
					
					

- ① Sujete pieza de mano de pulido por aire. ② Seleccione el modo Powder (Prophy  / Perio ). ③ Ajuste el nivel de potencia. ④ Ajuste el nivel de irrigación. ⑤ Pulse el botón ON / OFF.

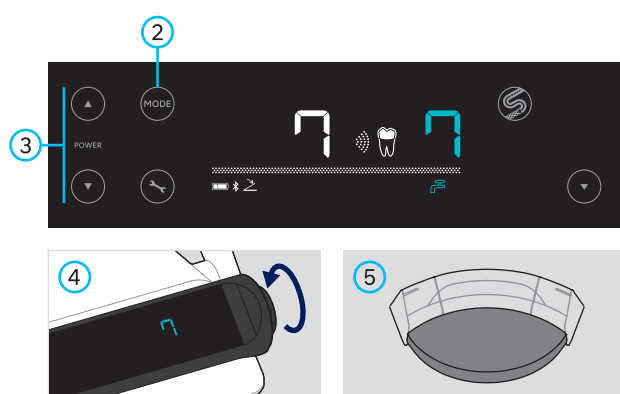

Autolimpieza

	Frecuencia de realización de modos de autolimpieza	Uso real de Varios Combi Pro2			
		Ultrasonidos y Polvo	Polvo solo	Ultrasonidos solo	
Modo de autolimpieza debe activarse	Después de cada tratamiento	W(Powder)	W(Powder)	—	W (Ultrasonidos): Eliminación del agua W (Polvo): Eliminación del agua y purga de polvo
	Una vez al día (después del tratamiento final)	D	P	W (Ultrasonidos)	P: Eliminación del agua de la manguera de la pieza de mano Eliminación del polvo del circuito de polvo Descarga de presión del depósito D: Eliminación del agua del cable/de la manguera de la pieza de mano Eliminación del polvo del circuito de polvo Descarga de presión del depósito

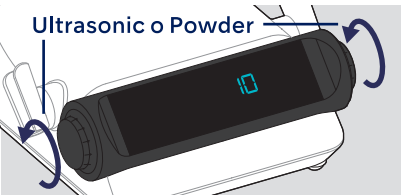

Ultrasonic o Powder



3 s




AC

Ajuste el nivel de irrigación a 10.

Toque  durante 3 segundos hasta que aparezca «AC».



W

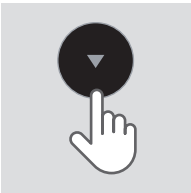



Pieza de mano ultrasónica



Pieza de mano de pulido



Fin


Seleccione «W».


Inserte la pieza de mano con el cable o la manguera en el soporte de CLM. Toque .

Después de que aparezca «Fin», toque .



P
D

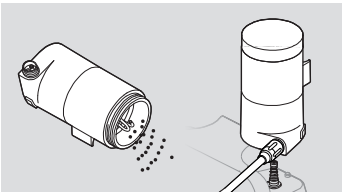

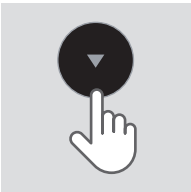



Pieza de mano de pulido
Pieza de mano ultrasónica



Fin

Deseche el polvo y coloque el depósito.

Seleccione «D» o «P».


Inserte las piezas de mano con cable /manguera en el soporte de CLM. Toque .


Después de que aparezca «Fin», toque .

Descontaminación y prevención de la formación de biopelícula (Modo CLM)



b.clean

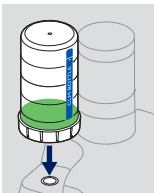


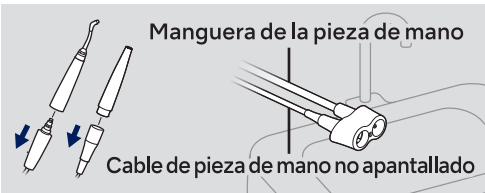

Manguera de la pieza de mano
Cable de pieza de mano no apantallado



CLM 3s

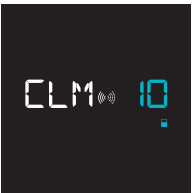

CLM 10

Llene el recipiente CLM con b.clean (sin diluir).

Inserte el recipiente CLM.

Retire el cable/la manguera de cada pieza de mano e insértelas en el soporte de CLM.

Toque  durante 3 segundos hasta que aparezca la pantalla anterior.




CLM 3s




FIL 10



SET 10

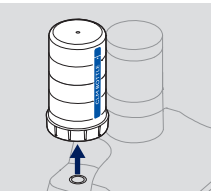

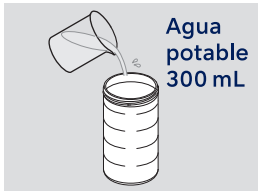


Agua potable 300 mL

Toque  durante 3 segundos hasta que se inicie el modo CLM.

Después de que aparezca la pantalla anterior, desconecte la alimentación y espere 12 horas o más.

Conecte la alimentación. Retire el recipiente CLM.

Llene el recipiente de irrigación desinfectado con agua potable.

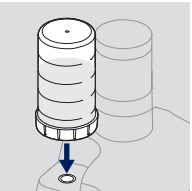



CLM 3s



IRA 10



Fin 10

Inserte el recipiente de irrigación.

Toque  durante 3 segundos hasta que se inicie el drenaje.

El modo CLM habrá finalizado cuando aparezca la pantalla anterior. Toque  para ir a la pantalla normal.