

Varios Combi Pro2



NSK



32

razones para elegir el Varios Combi Pro2

Después de escuchar las necesidades de una amplia gama de profesionales dentales, hemos creado un dispositivo combinado que ofrece la funcionalidad avanzada que realmente desean los profesionales dentales.

El Varios Combi Pro2 combina la terapia con polvo subgingival y supragingival con el escarificado ultrasónico para tratamientos periodontales, todo diseñado para facilitar su uso y adaptarse a tu estilo de tratamiento preferido.

Nacido de la amplia experiencia e investigación de NSK, el Varios Combi Pro2 ofrece el nivel de atención profesional que esperas de nuestra marca. Gracias a su durabilidad y mantenimiento sin complicaciones, es tu herramienta ideal para el uso diario, permitiéndote realizar procedimientos dentales de rutina de forma fluida y eficiente, sin interrupciones.

Con NSK a tu lado, tienes las herramientas para dar lo mejor de ti: brindando una atención eficaz y sin contratiempos, desde la prevención hasta el tratamiento, para cada paciente, en todo momento.

ULTRASONIDOS

Depósito de agua fácil de extraer

Para tu comodidad, el depósito de agua se puede quitar y volver a colocar fácilmente.

Pieza de mano ultrasónica de titanio

Incluye la primera pieza de mano ultrasónica del mundo fabricada en **titanio puro**. Nuestro exclusivo acabado **DURAGRIP** ofrece un agarre excelente y gran estabilidad durante el uso, mientras que la luz LED proporciona una visibilidad óptima.

Irrigación de agua ajustable

Gracias a nuestro selector analógico, puedes controlar con precisión e intuición el volumen de irrigación de agua.

Cada selector está asignado a las funciones del escaificador ultrasónico y del aeropulido.

Calentador de agua

Tanto el escaificador ultrasónico como la pieza de mano de aeropulido inyectan agua caliente, lo que mejora notablemente la comodidad del paciente.

AEROPULIDO

Unidad de aeropulido independiente

Nuestra unidad de aeropulido está diseñada de forma independiente al equipo principal. Está construida para ofrecer durabilidad y facilidad de mantenimiento, garantizando un flujo de trabajo fluido y sin interrupciones en tu práctica clínica diaria.

Boquilla Jet para pieza de mano Perio

La boquilla Jet de la pieza de mano Perio te ayuda a realizar un tratamiento preciso y dirigido, ya sea gingival o supragingival.

Pieza de mano con boquilla delgada


Nuestra boquilla delgada permite un acceso fácil a zonas de difícil alcance o visibilidad.

Panel de control fácil e inteligente

Incorpora un panel inteligente todo-en-uno, que muestra únicamente los controles relevantes para el procedimiento en curso, permitiendo un tratamiento enfocado y una operación sin esfuerzo.

BUSCANDO LA PERFECCIÓN

ULTRASONIDOS

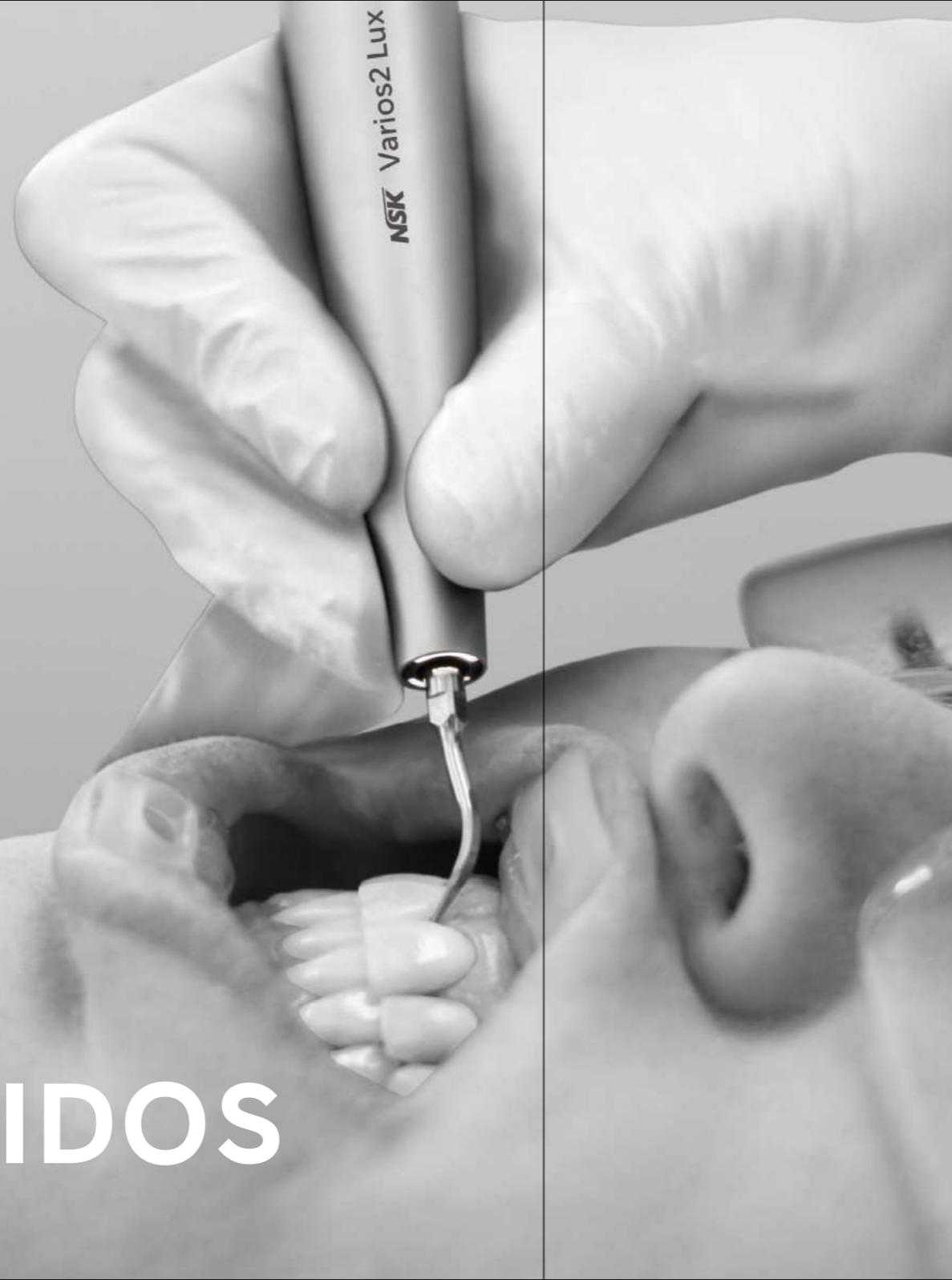

Ultrasonidos


Hecha para durar. Cómoda de usar.

En NSK no comprometemos la calidad. Nuestra pieza de mano ultrasónica ofrece una excelente experiencia para el usuario: comodidad, durabilidad, practicidad, fácil acceso y gran visibilidad.

El Varios Combi Pro2 está equipado con la primera pieza de mano ultrasónica del mundo fabricada en titanio puro, un material resistente al calor y a los productos químicos, capaz de soportar múltiples reprocesamientos y esterilizaciones en autoclave.

Además, para asegurar un agarre firme y estable, la pieza de mano cuenta con el reconocido acabado **DURAGRIP**, utilizado en la gama premium de piezas de mano NSK.

Este ultrasonidos elegante, duradero, bien equilibrado y ligero ofrece una comodidad excepcional y un rendimiento duradero.

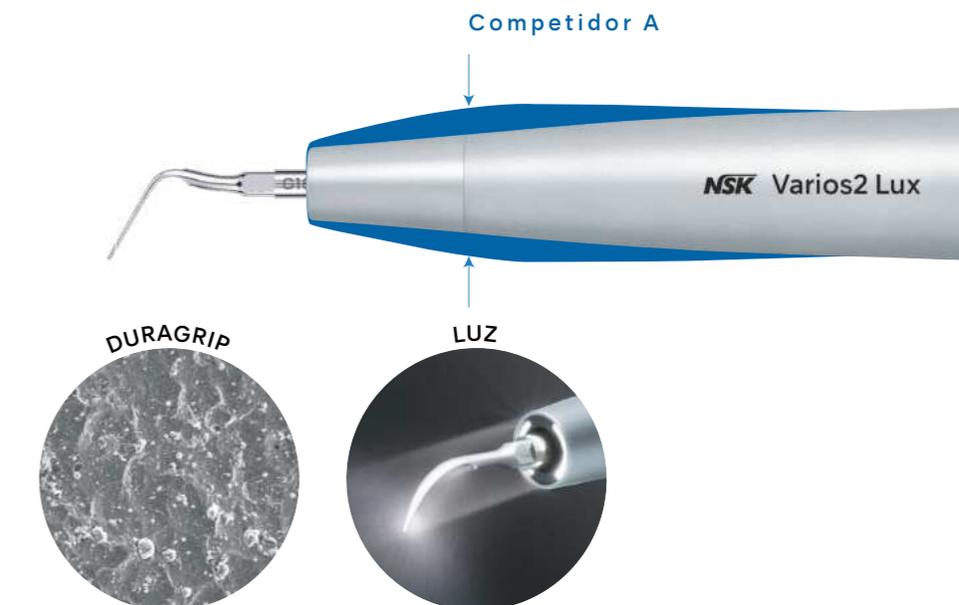

AEROPULIDO

Aeropulido

Boquillas delgadas e intercambiables.

Nuestras piezas de mano y boquillas para aeropulido están diseñadas para facilitar tu trabajo y hacerlo más eficiente:


- El acceso a la zona molar es más sencillo gracias a las boquillas largas y estrechas.
- Disfrutarás de una excelente visibilidad y maniobrabilidad dentro de la cavidad oral gracias al diseño delgado de las piezas de mano y boquillas.
- Se puede asegurar un amplio campo de trabajo en la cara lingual sin necesidad de abrir excesivamente los labios en la zona bucal.
- Las boquillas son totalmente reemplazables durante un procedimiento, lo que hace que el mantenimiento y las reparaciones sean rápidas y sin complicaciones.



Boquilla Jet para pieza de mano de aeropulido

En respuesta a las necesidades de los profesionales, hemos desarrollado una boquilla de chorro (Jet Nozzle) para la pieza de mano Perio, especialmente diseñada para tratamientos supragingivales.

Además de la boquilla Perio convencional, ahora es posible dirigir con precisión el tratamiento hacia la zona adecuada utilizando esta nueva boquilla, Jet Nozzle. Ambos tipos de boquillas Perio son intercambiables, según la aplicación clínica que se requiera.

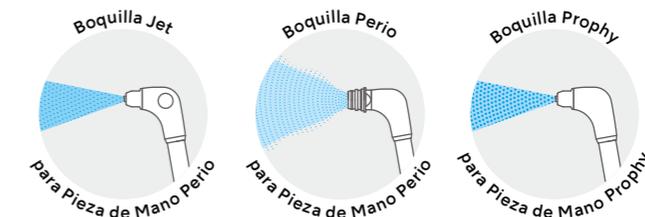


Siempre disponible



Unidad y cámaras independientes

Con el Varios Combi Pro2, todas las líneas de conducción de polvo (depósito de polvo, manguera y piezas de mano) están separadas del cuerpo principal del equipo.

En el poco probable caso de una obstrucción por polvo, las piezas pueden desmontarse fácilmente por el propio usuario. Generalmente, no es necesario desmontar el dispositivo completo ni enviarlo al distribuidor o fabricante para reparaciones o reemplazo de componentes.

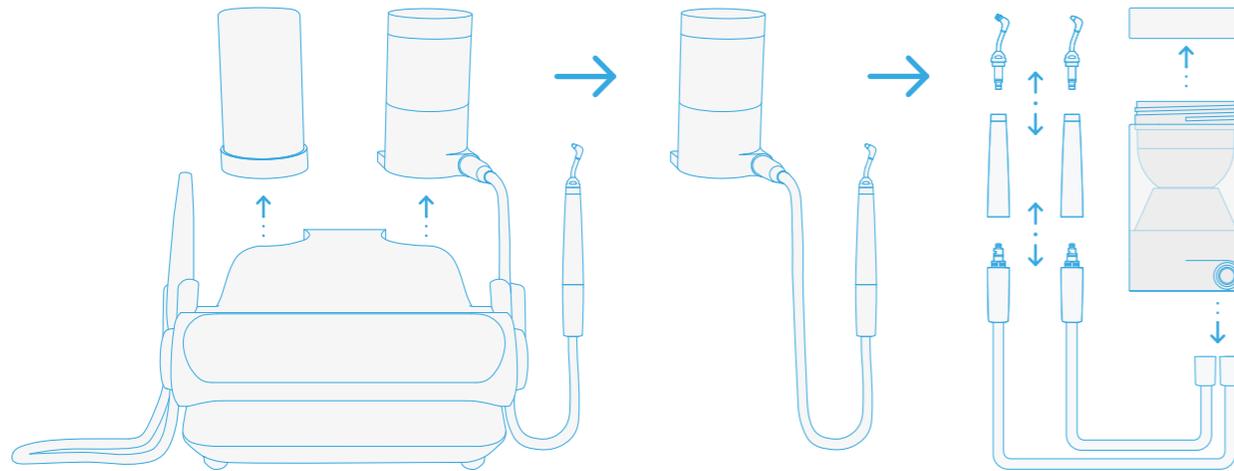

El interior de la unidad principal está diseñado bajo un concepto sencillo: solo cuenta con circuitos de aire y agua.



Sin mantenimientos periódicos necesarios

El Varios Combi Pro2 ha sido diseñado para que tú mismo puedas realizar el cuidado y mantenimiento diario de forma sencilla, por lo que no se requiere mantenimiento regular por parte del servicio técnico de NSK.

Esto significa que las interrupciones en la práctica por mantenimiento son cosa del pasado. Y, en caso de que lo necesites, siempre podrás contar con el apoyo de nuestro servicio técnico oficial.

Fácil mantenimiento

Auto-Cleaning (Limpieza Automática)



El Varios Combi Pro2 cuenta con cuatro modos de autolimpieza, que pueden activarse (según se requiera) después de cada sesión con el paciente o al finalizar la jornada.

Estos modos eliminan la necesidad de múltiples herramientas, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de obstrucción por polvo y acumulación de agua. Además, mantienen el interior del dispositivo siempre limpio.



Auto-cleaning
(Aeropolido)
Polvo



Auto-cleaning
(Aeropolido)
Agua



Auto-cleaning
(Ultrasonidos)
Agua



Auto-cleaning
(Aeropolido y Ultrasonidos)
Dual



Modo CLM



La limpieza del circuito de agua interno del Varios Combi Pro2 es sencilla gracias a nuestra solución b.clean y al ajuste del modo CLM, lo que permite que el equipo cumpla con los requisitos europeos de reprocesamiento.

Como mecanismo de seguridad adicional incorporado, la unidad está configurada para bloquear su uso hasta que la solución química haya sido completamente drenada.

Comodidad para el paciente

Sistema de calentamiento de agua



El Varios Combi Pro2 está equipado con un sistema de calentamiento del circuito de agua, tanto para el escarificador ultrasónico como para las piezas de mano de polvo.

Al mantener la temperatura del agua inyectada cercana a la de la cavidad oral, se garantiza mayor confort para una amplia variedad de pacientes, incluso aquellos con mayor sensibilidad.


Operabilidad

Pedal de control inalámbrico multifunción

Coloca el pedal de control en la posición más cómoda para ti, sin preocuparte por cables ni limitaciones de longitud.

El Varios Combi Pro2 se conecta mediante Bluetooth®, permitiendo un manejo cómodo y sin complicaciones gracias a sus opciones de control multifunción.

De esta forma, puedes concentrarte totalmente en el tratamiento, con mayor libertad y eficiencia.

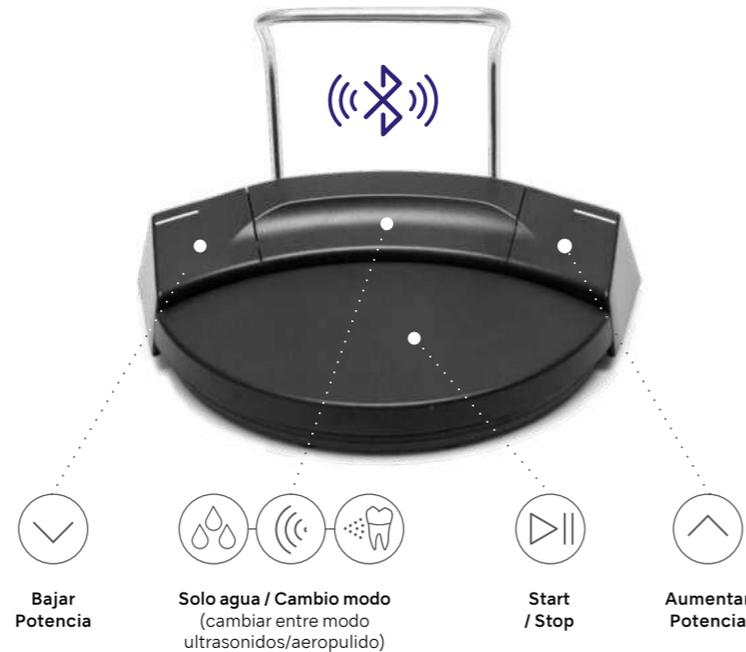

iCart Prophy2 con kit de botella de agua

Nuestro carrito aporta una nueva dimensión de comodidad y facilidad de uso.



Puede equiparse con un sistema de suministro de agua independiente, lo que permite que, al combinar el Varios Combi Pro2 con el iCart Prophy2, puedas atender a tus pacientes en entornos donde la disponibilidad o la calidad del agua sea un problema.



* El kit de botella de agua es opcional

Puntas Ultrasonidos

Nuestra amplia variedad de más de 70 tipos de puntas para scaler ultrasónico hace que el dispositivo sea ideal para una gran diversidad de aplicaciones clínicas, incluyendo tanto la odontología preventiva como el tratamiento de diversas patologías dentales.

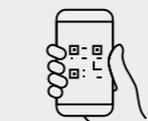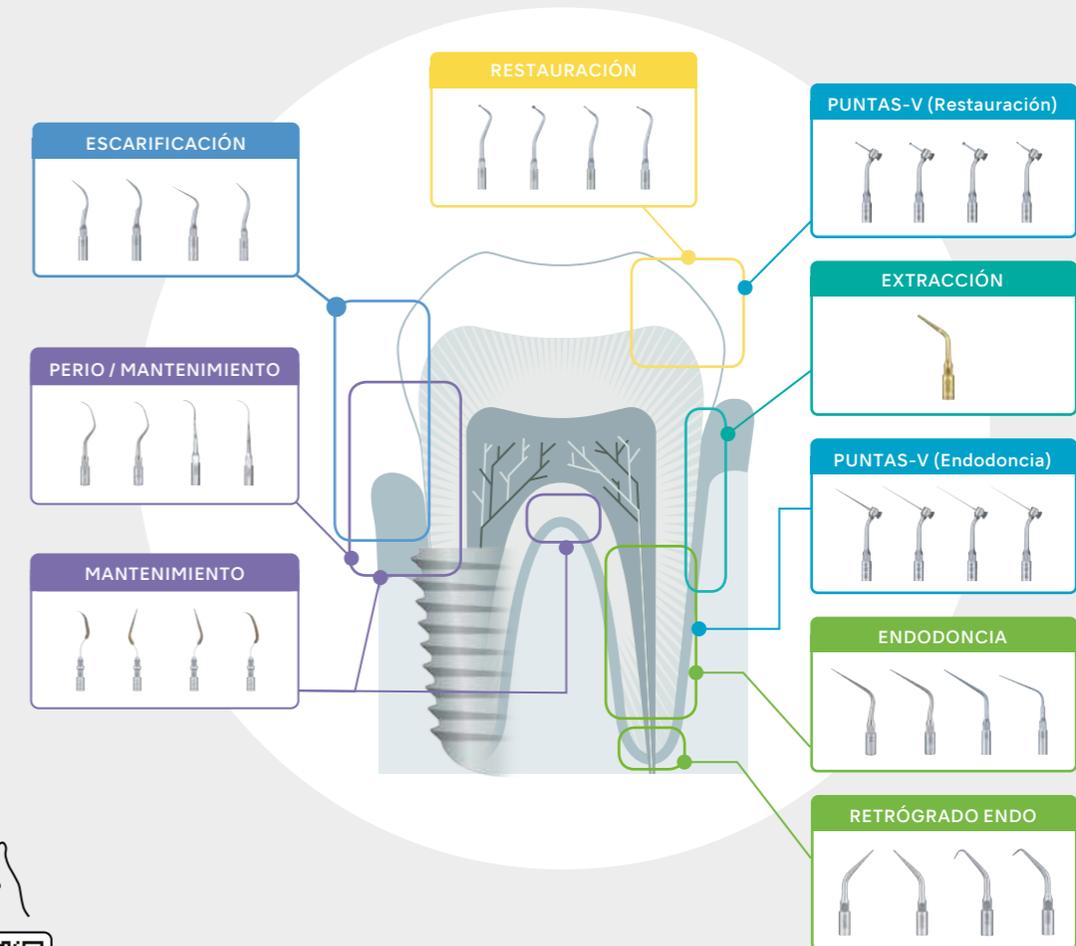

Escanee para descargar Guía de Puntas

Link: https://www.spain.nsk-dental.com/admin/wp-content/uploads/PR-D1045ESv2_211111.pdf

POLVOS



Polvos

Mantenimiento de sonrisas bonitas y sanas

La terapia con polvo elimina de forma eficaz las manchas y el biofilm tanto supragingival como subgingival. Al aplicar los beneficios y protocolos del Varios Combi Pro2, puedes abrir paso a una nueva era de atención profesional, logrando resultados excepcionales. Sin complicaciones para ti, y tranquilizador para tus pacientes.

FLASH pearl

Polvo de pulido para uso supragingival, con partículas esféricas que son suaves con la superficie dental.

Uso previsto: eliminación de manchas persistentes

Ingrediente principal:
Carbonato de calcio

- no contiene cloruro de sodio (sin sabor salado)
- apto para pacientes con dieta restringida en sodio

Tamaño promedio de partícula: **54µm**



SOFT pearl

Polvo de pulido para uso supragingival con baja invasividad superficial. Adecuado incluso para su uso con algunos dispositivos protésicos.

Uso previsto: eliminación de biofilm y manchas moderadas

Ingrediente principal: Glicina

- sin sabor añadido
- sabor dulce

Tamaño promedio de partícula: **65µm**



Perio Mate Powder


Polvo de pulido para uso en margen gingival y subgingival.

Uso previsto: eliminación de biofilm y manchas leves

Ingrediente principal: Glicina





- sin sabor añadido
- sabor dulce
- altamente soluble, no se apelmaza en aplicaciones subgingivales

Tamaño promedio de partícula: **25µm**

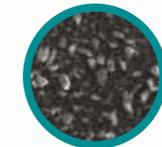

Pulido por aire

Combinación y usos de polvo + boquillas

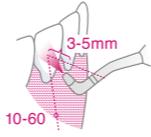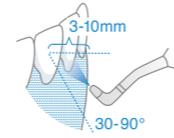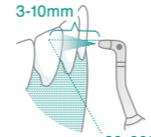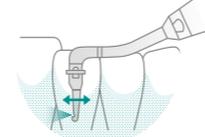MODO	KIT	PIEZA DE MANO	BOQUILLA	USO	POLVO
MODO PROPHY 	PROPHY 		 Boquilla (para uso Prophy)		
			 Boquilla (para uso Prophy)		
MODO PERIO 	PERIO 		 Boquilla Jet (para uso Perio)		
			 Boquilla + Punta (para uso Perio)		

MIT (Minimal Invasive Therapy)

Terapia Mínimamente Invasiva

Con el Varios Combi Pro2, puedes aplicar la Terapia Mínimamente Invasiva (MIT) de NSK, – ayudándote a ti, héroe de la higiene oral, a dar tu mejor versión.

Completa el PASO 1, PASO 2 y PASO 4 del protocolo MIT, utilizando su escarificador ultrasónico y el aeropulidor, para tratamientos supragingivales y subgingivales.



NSK está comprometido con la calidad en la higiene oral y con la creación de productos dentales para el uso diario.

Varios Combi Pro2

Set básico



ÓPTICO	MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO
●	Varios Combi Pro2 Set básico	Y1500505

- Contenido:**
- Unidad de control Varios Combi Pro2
 - VA2-LUX-HP Ti
 - VA2-LUX-SC Ti
 - Depósito Prophy-Chamber2
 - Manguera Prophy-Hose2
 - Pieza de ano para aeropolido (Prophy)
 - Pedal de control inalámbrico
 - Soporte
 - Manguera de aire
 - Manguera de agua
 - Cable de red
 - Set de botellas de irrigación
 - Set CLM
 - Puntas ultrasónicas
 - Polvo FLASH pearl (300 g)
- Especificaciones:**
- Dimensiones: A 249 × P 290 × Al 115 mm (incluyendo los depósitos)
 - Peso: 3.5 kg
 - Fuente de alimentación: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
 - Frecuencia de trabajo (ultrasónico): 28 - 32 kHz
 - Potencia máxima (ultrasónico): 11 W

Opcional



MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO
Prophy Kit2	Y1500469

- Contenido:**
- Depósito Prophy-Chamber2
 - Manguera Prophy-Hose2
 - Pieza de mano para aeropolido (Prophy)
 - Polvo FLASH pearl (300 g)

* Incluido en el set básico del Varios Combi Pro2.



MODELO	CÓDIGO DE PEDIDO
Perio Kit2	Y1500470

- Contenido:**
- Depósito Perio-Chamber2
 - Manguera Perio-Hose2
 - Pieza de mano para aeropolido (Perio)
 - Punta de boquilla Perio Nozzle (40 unidades)
 - Removedor de punta Perio Mate Nozzle
 - Polvo Perio Mate (160 g)

Accesorios opcionales

MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

iCart Prophy2
Dimensiones: A 840 mm
Peso: 16 kg



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

VA2-LUX-HP Ti **EA1203X050**



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

B.clean
(6 botellas de 1L) **BCL600**



Repuestos

MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

Boquilla
(para uso Prophy) **T1074012**



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

Set de Irrigación
(para el Kit de botella de agua) **ZA16160001**



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

Kit de Botella de Agua **Y1500719**

- Contenido:**
- Set de agua
 - Set CLM
 - Herramienta de purgado



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

Pieza de mano de aeropolido
(para uso Prophy) **T1074001**



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

Pieza de mano de aeropolido
(para uso Perio) **T1077001**



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

Boquilla
(para uso Perio) **T1077012**



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

Set botella CLM
(para kit botella de agua) **ZA16240001**



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

Set Módulo CLM **Y1500740**

- Contenido:**
- Acoplamiento CLM Perio
 - Acoplamiento CLM Prophy



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

Pieza de mano de aeropolido
(para uso Perio) **T1077001**



MODELO	PRODUCTOS	CÓDIGO DE PEDIDO
--------	-----------	------------------

Boquilla Jet
(para uso Perio) **TA10770106**



NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma
Tochigi 322-8666, Japan

NSK Europe GmbH www.nsk-europe.de
Elly-Beinhorn-Str. 8
65760 Eschborn, Germany

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es
C/ Rozabella 8, Europa Empresarial Business Park, Edificio Roma,
Planta baja, Oficina A, 28290 Las Rozas de Madrid, Madrid, Spain

Las características técnicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso.

Create it 