

iProphy SETS COMPLETOS



MODELO : **iProphy Set Completo**
 CÓDIGO DE PEDIDO : **Y1500015**

- Incluye :
- Pieza de mano iProphy • Cabezal iFX57
 - Soporte iProphy • Adaptador de CA • Boquilla Tipo-F

iProphy sin Cabezal

MODELO : **iProphy W/O**
 CÓDIGO DE PEDIDO : **Y1500069**

- Incluye :
- Pieza de mano iProphy
 - Soporte iProphy • Adaptador de CA • Boquilla Tipo-F

iProphy CABEZALES



MODELO : **iFX57**
 CÓDIGO DE PEDIDO : **C1102**

- Para iProphy • Para atornillables
- Reducción 4:1



MODELO : **PR-F**
 CÓDIGO DE PEDIDO : **H209**

- Para ángulos Prophy desechables
- Reducción 4:1



REPUESTOS

MODELO	PRODUCTO	CÓDIGO DE PEDIDO
Pieza de mano iProphy		EA11170020
Soporte iProphy		UA10910020
Adaptador de CA		Y1500014
PAQUETE DE BATERÍAS		E1080052
Boquilla Tipo-F		Z256090

Lavable en termodesinfectante

Esterilizable con autoclave



iProphy

PIEZA INALÁMBRICA DE PULIDO

Devuelve El Control a Tus Manos.

Sin pedal de control, el iProphy inalámbrico te da mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con gran control. Lleva al siguiente nivel tu práctica clínica mejorando tu rendimiento todos días.


La pieza de mano inalámbrica es fácil de usar.

La ausencia de cables elimina las restricciones posturales o angulares durante los tratamientos, lo que reduce considerablemente el estrés procedimental. Libertad total para seguir al usuario a cualquier lugar y posición durante el tratamiento.



Su cabeza ultra mini permite un campo de visión discreto.

La fina y larga cabeza ultra mini garantiza un campo de visión amplio dentro de la cavidad oral, un fácil acceso y un excelente alcance. Permite un tratamiento más suave y preciso.

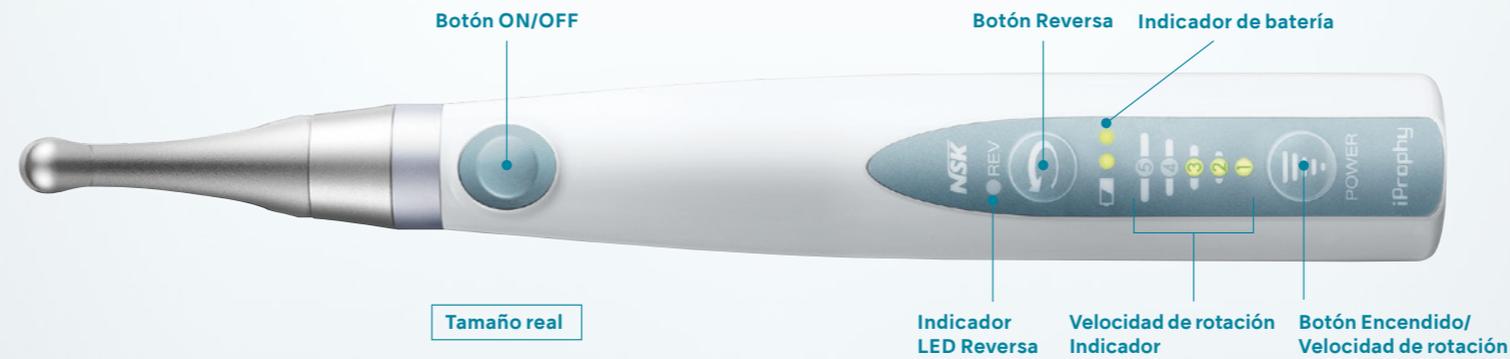

Fácil control de potencia.

Control de potencia manual. No se precisa el manejo con los pies. iProphy mantiene fácilmente una rotación de baja velocidad, la cual es difícil para el tamaño estándar de los contra ángulos estándares.



Ligero y fácil de usar.

Ergonómicamente diseñado y desarrollado para incluir las últimas características ergonómicas. Esta ligera, fácil de agarrar y bien nivelada pieza de mano no pesa ni cuando debe utilizarse para tratamientos de pulido más prolongados.



Fácil cambio del cabezal.

Fácil cambio del cabezal mediante el sistema de juntas rápidas. Además, su operatividad ha sido mejorada, ya que la cabeza se puede colocar formando seis ángulos diferentes para adaptarse a la posición requerida por cada tratamiento.



Su interfaz de usuario es sencilla y clara.

Su intuitiva interfaz de usuario facilita los procedimientos. Los botones ON/OFF son grandes y fáciles de presionar.



Dispone, además, de un amplio abanico de ajustes de velocidad.

Al cambiar las cabezas, se puede elegir entre un amplio rango de velocidades que van de las 500 a las 2 500 revoluciones por minuto. Esta pieza manual se puede utilizar para una gran variedad de procedimientos.