

# POWER **4** THE HARDER

S-Max M9**4**L





# Eliminación de zirconio más rápida y suave

El zirconio es un material ideal para restauraciones dentales gracias a su resistencia y estética, pero su elevada dureza hace que su retirada sea un proceso lento y complicado. El nuevo contra-ángulo de NSK ofrece un alto torque que permite una eliminación de zirconio más suave y eficiente.

**Torque incrementado un 24%;  
Durabilidad un 170%.**



## Aumento de Torque del 24%

Para lograr un corte más eficiente, el torque se ha incrementado en un 24 %\*. Esto no solo reduce el tiempo de tratamiento, sino que también minimiza la carga para el paciente.


## Durabilidad Excepcional

La vida útil se ha mejorado 2,7 veces\*, lo que lo hace muy adecuado debido a la alta dureza del óxido de circonio y, al mismo tiempo, ofrece una excelente resistencia al desgaste. Incluso con un uso prolongado, proporciona un rendimiento estable.



## Transmisión 1:4

Se ha rediseñado la el marcado de la transmisión con respecto a los modelos de la Serie S-Max M. Este nuevo diseño destaca la nueva transmisión del contraángulo S-Max M94L(1:4), para garantizar una identificación rápida y clara de este contra-ángulo.

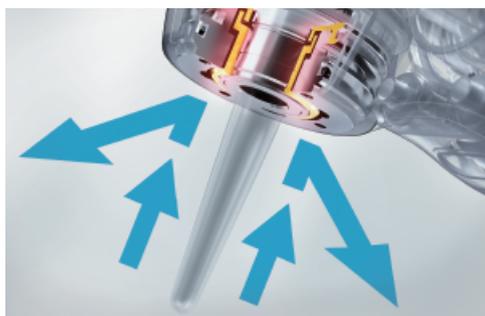

## Clean Head System

El sistema Clean-Head cuenta con un mecanismo que impide la aspiración inversa de sangre, fluidos orales y cuerpos extraños hacia el interior de la cabeza del instrumento. Además de los evidentes beneficios higiénicos que esto conlleva, también protege los rodamientos y los componentes mecánicos de estos factores externos.

\* En comparación con nuestro modelo actual



	Óptico	MODELO	REF.
1:4 Multiplicador	●	M94L	CA13170001

- Velocidad máx: 160,000 min<sup>-1</sup>
- Tamaño del cabezal: Ø9. 9 x H 14.5 mm • For FG burs (Ø1.6)
- Cuerpo de titanio • Portafresas Push-Button
- Rodamientos de cerámica • Spray Quattro
- Clean Head System • Fibra de vidrio celular