



NSK

get it!

OFERTAS ESPECIALES NSK DENTAL SPAIN

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026



NSK



La innovación continúa marcando el camino en NSK. De septiembre a diciembre, presentamos una nueva campaña de ofertas especiales diseñada para ayudar a los profesionales a seguir incorporando tecnología de alto rendimiento a su práctica diaria. Una selección de soluciones que combinan precisión, fiabilidad y eficiencia para responder a las necesidades de la odontología actual.

En esta edición incorporamos importantes novedades, entre ellas la promoción especial con la turbina Ti-Max Z990L, una oportunidad única para descubrir el extraordinario rendimiento de una de las referencias más avanzadas de NSK. Además, mantenemos condiciones especiales en una amplia selección de instrumental rotatorio, dispositivos y equipos que forman parte del día a día de miles de clínicas.

El Varios Combi Pro2 continúa siendo uno de los grandes protagonistas de nuestra propuesta. Su combinación de ultrasonidos y aeropulido en un único equipo permite abordar con eficacia tratamientos preventivos, periodontales y de mantenimiento, optimizando los tiempos clínicos y mejorando tanto la experiencia del profesional como la del paciente.

Todo ello se enmarca dentro de Minimally Invasive Therapy, la iniciativa de NSK inspirada en las recomendaciones de la European Federation of Periodontology y orientada a promover una odontología basada en la prevención, la mínima intervención y el mantenimiento a largo plazo de la salud oral. Durante los próximos meses seguiremos impulsando esta filosofía mediante nuevos cursos, demostraciones clínicas, webinars y actividades formativas, por lo que invitamos a todos los profesionales a permanecer atentos a los eventos que iremos anunciando.

El último trimestre del año también estará marcado por importantes encuentros científicos. Estaremos presentes en el **EAO (Asociación Europea de Oseointegración)**, del 24 al 26 de septiembre en Lisboa; en SEPES, del 8 al 10 de octubre en Málaga; y en OMD, del 19 al 21 de noviembre en Lisboa. Será una excelente oportunidad para conocer de primera mano nuestras últimas novedades, descubrir las promociones vigentes y compartir con el equipo NSK las tendencias que están definiendo el futuro de la odontología.

Tecnología, formación e innovación continúan siendo los pilares de NSK. Seguimos trabajando para ofrecer soluciones que aporten valor real a la práctica diaria y acompañen a los profesionales en cada paso hacia una odontología más eficiente, predecible y mínimamente invasiva.

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain

Turbinas

Ti-Max Z

TURBINAS DE TITANIO CON LUZ

- Cabezal en ángulo de 100° • Cuerpo de titanio con DURAGRIP resistente a arañazos • Rodamientos de cerámica
- Óptica de vidrio celular • Porta-fresas Push Button • Spray Quattro • Sistema de cabezal limpio • Quick Stop
- Microfiltro • DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWERC HUCK • Fácil cambio de cartucho

 **2 años de garantía**

Conexión NSK

Z990L

REF. PA2373

Conexión KaVo® MULTIflex®

Z990KL

REF. PA2375

- Velocidad: 280.000-360.000 min⁻¹
- Tamaño del cabezal: ø12,1 x H 12,7 mm

OFERTA 1 + 1

Z990L

+

Z990L

1.199€*

3.694€*

2 TURBINAS DEL MISMO MODELO

Z990KL

+

Z990KL

1.199€*

3.694€*



**POTENCIA
44W**

* Oferta también disponible con las turbinas Ti-Max Z890L(PA2372) y Ti-Max Z890KL(PA2374).

** Oferta también disponible con otras conexiones.

CARACTERÍSTICAS TI-MAX Z990L



DYNAMIC POWER SYSTEM

Equipada con el nuevo Dynamic Power System, que ofrece máxima potencia rotacional y una sensación de corte revolucionaria.



DURAPOWERC HUCK

Mayor fuerza de agarre de la fresa gracias al sistema DuraPower Chuck.




QUICK STOP

Función de parada de emergencia que reduce el riesgo de atrapamiento y succión intraoral.



RECUBRIMIENTO DURAGRIP

El exclusivo tratamiento antideslizante y anti-arañazos de la superficie mejora la durabilidad y garantiza un cómodo agarre.

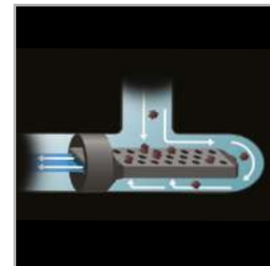

MICROFILTRO

Previene el ingreso de partículas al sistema de pulverizador de agua para garantizar una óptima refrigeración de agua en todo momento.

TAMAÑO PEQUEÑO, ENORME OPERATIVIDAD

 **2 años de garantía**

- Velocidad: 380.000-450.000 min⁻¹ • Tamaño del cabezal: ø9,0 ~ H 10,8 mm • Cuerpo de titanio con DURAGRIP
- Óptica de vidrio celular • Rodamientos de cerámica • Sistema de cabezal limpio • Para fresas estándar y mini • Porta-fresas Push Button
- Spray Quattro • 3X-Power System • Quick Stop • Fácil cambio de cartucho



**POTENCIA
20W**

Conexión NSK

Z micro PTL

REF. PA2357

Conexión KaVo® MULTIflex®

Z micro KL

REF. PA2358

749€*

1.703€*

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Alemania

Turbinas

S-Max M

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ

- Clean Head System (Anti-retorno) • Tamaño del cabezal: $\varnothing 12,1 \times \text{Al } 13,3 \text{ mm}$ • Velocidad: 325.000~430.000 min⁻¹
- Cuerpo de acero inoxidable • Spray de agua Quattro • Porta-fresas Push Button • Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

 **2 años de garantía**

Conexión NSK

M900L

REF. P1254

Conexión KaVo® MULTIflex®

M900KL

REF. P1258

OFERTA 1 + 1

M900L + M900L

2 TURBINAS DEL MISMO MODELO

899€* 2.022€*

M900KL + M900KL

899€* 2.266€*



POTENCIA
26W

ACOPLAMIENTOS

- Válvula Anti-Retorno



Acoplamiento para instrumentos NSK

PTL-CL-LED

REF. P1001600

229€*
469€*



Acoplamiento para instrumentos KaVo®

KCL-LED

REF. P1005600

359€*
668€*

Tarifa Plana Serie S-Max M

Ser original no tiene precio.
Seguir siéndolo, sólo 199€*



TARIFA PLANA NSK

Tu turbina de la **Serie S-Max M** como nueva, gracias a la promoción especial Tarifa Plana NSK. Cambia el antiguo rotor de tu turbina por un nuevo rotor original NSK, por sólo 199€* (mano de obra incluida).

¡Aprovéchala ahora!



Turbinas

S-Max pico

TURBINA DE ACERO INOXIDABLE CON LUZ


POTENCIA 9W

- Tamaño del cabezal: $\varnothing 8,6 \times \text{Al } 9 \text{ mm}$
- Velocidad: 380.000~450.000 min^{-1}
- Spray simple
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de cabezal limpio

LA CABEZA MÁS
PEQUEÑA DEL MUNDO



Escala 1:1

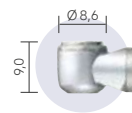

Cabezal: $\varnothing 8,6 \text{ mm}$
Altura del Cabezal: 9,0 mm

Conexión NSK

S-Max pico PTL

REF. P1140

749€*

1.188€*

Conexión KaVo® MULTIflex®

S-Max pico KL

REF. P1142

749€*

1.277€*

Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE SIN LUZ

POTENCIA 20W

- Clean Head System (Anti-retorno)
- Tamaño del cabezal: $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray simple
- Porta-fresas Push Button
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión NSK

Pana-Max2 PTL

REF. P1211

349€*

696€*

Conexión KaVo® MULTIflex®

Pana-Max2 KV

REF. P1212

349€*

748€*

Pack Pana-Max2 M4

POTENCIA 20W

- Clean Head System (Anti-retorno)
- Válvula anti-retorno
- Tamaño del cabezal: $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray simple
- Porta-fresas Push Button
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión directa

Pana-Max2 M4

REF. P1154

OFERTA 1 + 1

Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4

519€*

1.112€*

2 TURBINAS DEL MISMO MODELO



Tarifa Plana Pana-Max2

Ser original no tiene precio.
Seguir siéndolo, sólo 179€*



TARIFA PLANA NSK



Tu turbina de la **Serie Pana Max2** como nueva, gracias a la promoción especial Tarifa Plana NSK. Cambia el antiguo rotor de tu turbina por un nuevo rotor original NSK, por sólo 179€* (mano de obra incluida).

¡Aprovéchala ahora!



Kits

Kit Premium PLUS



Turbina de Titanio Con Luz
Z990L REF. PA2373



+ Acoplamiento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



+ Contra-Ángulo de Titanio Con Luz (1:1)
Z25L REF. C1038



1.329€*
3.558€*

Kit Superior PLUS



Turbina de Acero Inoxidable Con Luz
M900L REF. P1254



+ Acoplamiento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



+ Contra-Ángulo de Acero Inoxidable Sin Luz (1:1)
M25 REF. C1027



899€*
2.222€*

Micromotores

M40 XS



MICROMOTOR ELÉCTRICO CON LUZ



Con Luz

M40 XS
REF. E1135051

- Anti-retorno
- Micromotor eléctrico ultracompacto
- Cuerpo de titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

719€*
1.354€*

M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO SIN LUZ



Sin Luz

M40N XS
REF. E1136051

- Anti-retorno
- Micromotor eléctrico ultracompacto
- Cuerpo de titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

539€*
918€*

S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO SIN LUZ



Sin Luz

S-Max M205
REF. M1007

- Anti-retorno
- El más pequeño y ligero del mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min⁻¹
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

469€*
650€*

Contra-Ángulos

NUEVO

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULO DE TITANIO CON LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro

SPRAY SWITCH



3 años de garantía

Con Luz 1:5

Z99L

REF. CA1314

OFERTA 1 + 1

Z99L



Z99L

1.499€* 3.884€*

2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO



ERGONOMÍA, DURABILIDAD Y RENDIMIENTO



CABEZAL ANGULADO 100°



Diseñado teniendo en cuenta las curvas anatómicas naturales de la cavidad oral (Curva de Spee y Curva de Wilson), lo que permite un corte de alto torque para un tratamiento más eficiente.

SPRAY SWITCH



La función de doble irrigación permite a los operadores cambiar fácilmente entre modo chorro y modo niebla. El modo chorro reduce el riesgo de enfisema subcutáneo durante procedimientos invasivos, mientras que el modo niebla ofrece una fuerte refrigeración para evitar daños térmicos.

SISTEMA ANTI-CALOR



Las piezas de mano de ultra alta velocidad requieren tecnología avanzada para controlar el calor. El diseño exclusivo de la cabeza del Z99L limita y dispersa el calor durante el tratamiento, mientras que su configuración optimizada de engranajes y rodamientos reduce el riesgo de sobrecalentamiento.

PORTAFRESAS DURAPOWERTM



El portafresas DURAPOWERTM de NSK ofrece una sujeción más potente y constante, reduciendo el riesgo de deslizamiento de la fresa en comparación con modelos convencionales. Su tecnología exclusiva crea un "efecto cuña" que mejora el rendimiento del portafresas y asegura una sujeción firme durante el uso.

Contra-Ángulos

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO CON LUZ

- Clean Head System (Anti-retorno) • Cuerpo de titanio con DURAGRIP resistente a arañazos
- Óptica de vidrio celular • Porta-fresas Push Button • Microfiltro

 **3 años de garantía**



Con Luz 1:1

Z25L

REF. C1038

- Spray simple
- Para fresas CA (ø2,35)*
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹

OFERTA 1 + 1

Z25L

+

Z25L

1.199€*

~~2.484€*~~

2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO



Con Luz 1:4,2

Z45L

REF. C1064

- Spray Quattro
- Para fresas FG (ø1,6)*
- Velocidad máxima: 168.000 min⁻¹
- Cabezal angulado 45°

999€*

~~1.735€*~~

Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (Anti-retorno) • Cuerpo de titanio con DURACOAT resistente a arañazos
- Óptica de vidrio celular • Porta-fresas Push Button • Microfiltro

 **2 años de garantía**



Con Luz 1:5

X95L

REF. C600

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹

899€*

~~1.656€*~~



Sin Luz 1:5

X95

REF. C610

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹

699€*

~~1.266€*~~



Con Luz 1:1

X25L

REF. C601

- Spray simple
- Para fresas CA (ø2,35)*
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹

699€*

~~1.222€*~~



Sin Luz 1:1

X25

REF. C611

- Spray simple
- Para fresas CA (ø2,35)*
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹

459€*

~~871€*~~

Contra-Ángulos

NUEVO

S-Max M

CONTRA-ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE

- Clean Head System (Anti-retorno)
- Spray Quattro
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹
- Porta-fresas Push Button
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro



3 años de garantía

Con Luz 1:4

M94L

REF. CA1317

OFERTA 1 + 1

M94L + M94L

1.199€*

2.616€^z

2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO



S-Max M94L
POWER 4 THE HARDER



Descubre más. Escanea el código QR.

AUMENTO DE TORQUE DEL 24% Y DURABILIDAD



Para lograr un corte más eficiente, el torque se ha **incrementado en un 24%***. Esto no solo reduce el tiempo de tratamiento, sino que también minimiza la carga para el paciente.

La vida útil se ha mejorado 2,7 veces*, lo que lo hace muy adecuado debido a la alta dureza del óxido de circonio y, al mismo tiempo, ofrece una excelente resistencia al desgaste. Incluso con un uso prolongado, proporciona un rendimiento estable.

* En comparación con nuestro modelo actual

TRANSMISIÓN 1:4



Se ha rediseñado el marcado de la transmisión con respecto a los modelos de la Serie S-Max M. Este **nuevo diseño** destaca la nueva transmisión del contra-ángulo S-Max M94L(1:4), para garantizar una identificación rápida y clara de este contra-ángulo.

CLEAN HEAD SYSTEM



El sistema Clean-Head cuenta con un mecanismo que impide la aspiración inversa de sangre, fluidos orales y cuerpos extraños hacia el interior de la cabeza del instrumento. Además de los evidentes beneficios higiénicos que esto conlleva, también protege los rodamientos y los componentes mecánicos de estos factores externos.

Contra-Ángulos

S-Max M

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

• Clean Head System (Anti-retorno) • Porta-fresas Push Button • Rodamientos de cerámica

 **2 años de garantía**



Sin Luz 1:5

M95

REF. C1026

- Spray Quattro
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)



Con Luz 1:5

M95L

REF. C1023

- Spray Quattro
- Velocidad máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)

OFERTA 1 + 1

M95 + M95

899€* ~~1.976€*~~

2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

M95L + M95L

1.199€* ~~2.616€*~~



Sin Luz 1:1

M25

REF. C1027

- Spray simple
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)



Con Luz 1:1

M25L

REF. C1024

- Spray simple
- Velocidad máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)

OFERTA 1 + 1

M25 + M25

699€* ~~1.484€*~~

2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO

M25L + M25L

899€* ~~1.970€*~~



PIEZA DE MANO

 **2 años de garantía**

Sin Luz 1:1

M65

REF. H1008

429€*
~~715€*~~



Mantenimiento

iCare + M25

SISTEMA DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones intra (para contra-ángulos)
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad



Sistema automático de limpieza
iCare C2 REF. Y1002787



+ **S-Max M25** REF. C1027001

+ **2 Adaptadores de turbina a elegir**

1.999€*
4.590€*

Pana Spray Plus

LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para turbinas, contra-ángulos, piezas de mano y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano. Lubrique su instrumental antes de cada ciclo de autoclave



Limpieza
Pana Spray Plus
REF. Z182100

- 1 x 500 ml

23,99€*

iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5



Sistema automático de limpieza
iCare+ C2 REF. S102001



+ **n.clean** REF. ACL600

+ **n.cid** REF. ACD600

+ **Aceite de mantenimiento** REF. Z016117

+ **2 adaptadores de turbina a elegir**

6.139€*
10.171€*



Limpieza
n.clean
REF. ACL600

- 6 x 500 ml

169€*
220€*



Desinfección
n.cid
REF. ACD600

- 6 x 500 ml

169€*
235€*

Autoclaves

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

MAYOR SEGURIDAD, MAYOR CAPACIDAD

Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo calor adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos.

Cámara de 18 litros de capacidad con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros.

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica. Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero.

 **2 años de garantía**

iClave plus
REF. Y1003077

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

3.699€*
8.701€*



Ergonómico: el sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas.



Rápido y seguro: su cámara de cobre ofrece una alta conductividad térmica en todo el tanque y por lo tanto los ciclos son más rápidos con un menor consumo energético.



Silencioso: ciclos de esterilización rápidos y silenciosos para tu clínica.

**COMPRA YA
PAGA LUEGO** 
SOLO 369,90€ /MES

*Paga durante 10 meses sin intereses



Purity

PURIFICADOR DE AGUA
DE ÓSMOSIS INVERSA

Purity
REF. 98018030

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

1.179€*
1.964€*



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

Newseal Plus

TERMOSELLADORA

Newseal Plus
REF. Z1279001

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

499€*
988€*



Helix Test

TEST DE PENETRACIÓN DE VAPOR EN
PIEZAS DE MANO

Helix Test
REF. 9900059

El test permite verificar la penetración del vapor en un cuerpo hueco. Se suministra con 250 indicadores de control, fáciles de interpretar y conformes con la norma EN 867-5.

169€*
277€*



Surgic Pro2

MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

Surgic Pro2 LED

REF. Y1004195

El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2 LED**
- Pedal de control inalámbrico **FC-81**
- Micromotor **SGL80M**
- **NUEVO** Contra-ángulo 20:1 **X-SG20ML**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

POTENCIA HASTA 80 Ncm

Surgic Pro2

REF. Y1004196

El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2**
- Pedal de control inalámbrico **FC-81**
- Micromotor **SG80M**
- **NUEVO** Contra-ángulo 20:1 **SG20M**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios



Escanea el código QR para más información

OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



1 Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga.



2 Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúrgicos.



3 Estos nuevos modelos mantienen las prestaciones, fiabilidad y rendimiento que ya conoces, incorporando además un cabezal mini que optimiza la visibilidad durante los tratamientos quirúrgicos, facilitando un trabajo más preciso y eficiente.



4 Silencio y suavidad gracias a la nueva bomba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



5 Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece la máxima seguridad en la colocación de implantes.



6 Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto riesgo.



7 Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg 4, el Osseo100+, el pedal de control inalámbrico y iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



8 Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional.

Surgic Pro2

MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

BEST PROMO

Surgic Pro2**

+ SG20M

3.099€*

6.610€*



Surgic Pro2 LED**

+ X-SG20ML

4.099€*

8.878€*



**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

BEST PROMO OSSEO 100+

Surgic Pro2**

+ SG20M

+ Osseo 100+

4.559€*

10.428€*



Surgic Pro2 LED**

+ X-SG20ML

+ Osseo 100+

5.559€*

12.696€*



**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo + 1 Osseo 100+

Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

Surgic Pro LED

REF. Y1003586

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor LED **SGL70M**
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

Surgic Pro

REF. Y1003587

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M** no óptico
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

POTENTE · SEGURO · PRECISO



SURGIC PRO

Surgic Pro**

+ SG20 x3 REF. C1010

Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)

3.099€*

7.534€*

OPCIÓN 1

Surgic Pro***

+ SG20 REF. C1010

Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)

+ X-SG93 REF. C1007

Contra-ángulo sin luz (Multiplicador 1:3)

+ X-SG65 REF. H1038

Pieza de mano sin luz (Velocidad Directa 1:1)

3.099€*

7.360€*

OPCIÓN 2

**1 contra-ángulo de serie + 2 contra-ángulos adicionales del mismo modelo

*** 1 contra-ángulo de serie + 1 multiplicador + 1 pieza de mano adicional



SURGIC PRO LED

Surgic Pro LED**

+ X-SG20L x3 REF. C1003

Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)

4.099€*

10.210€*

OPCIÓN 1

Surgic Pro LED***

+ X-SG20L REF. C1003

Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)

+ X-SG93L REF. C1004

Contra-ángulo con luz (Multiplicador 1:3)

+ X-SG65L REF. H1009

Pieza de mano con luz (Velocidad Directa 1:1)

4.099€*

9.916€*

OPCIÓN 2

**1 contra-ángulo de serie + 2 contra-ángulos adicionales del mismo modelo

*** 1 contra-ángulo de serie + 1 multiplicador + 1 pieza de mano adicional



Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEointegración

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

VALOR ISQ



Osseo 100

REF. Y1004175

1.479€*
3.342€*



Osseo 100+

REF. Y1004176

1.679€*
3.818€*




¡TAN FÁCIL COMO 1, 2, Y 3!



1

FIJACIÓN

Fijar el MultiPeg™ en el implante. Se atornilla sin esfuerzo en la rosca del implante (6-8 Ncm de torque aproximadamente).

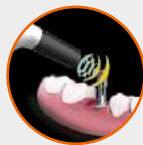

2

MEDICIÓN

La medición se muestra como un valor ISQ. Lo conseguimos con la vibración del Osseo 100 transformada en valor ISQ.



3

EVALUACIÓN

Mediante mediciones adicionales durante el período de cicatrización, se puede monitorear el desarrollo de la estabilidad del implante, lo que proporciona confianza y respaldo para determinar cuándo proceder con la carga final. Cuanto mayor sea el valor ISQ, mayor será la estabilidad.

MulTiPeg™

REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar



38€*
71€*



* Existen diferentes modelos de MulTiPeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.

iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO

iSD900

REF. Y1001358

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min⁻¹

1.329€*
2.209€*



VarioSurg 4 + SG12

SISTEMA ULTRASONÍCO DE CIRUGÍA ÓSEA



Incluye:

- Unidad de control
- Pieza de mano LED con cable de 2m
- Pedal de control **FC-86**
- Cassette de esterilización
- Soporte para pieza de mano
- Tubo de irrigación (3 uds.) y otros accesorios
- Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 y soporte de puntas)
- **NUEVA Punta SG12**

Características:

- Gran aumento de potencia
- 3 modos (CIRUGÍA, ENDO, PERIO)
- Modo ráfaga seleccionable (3 frecuencias)
- Funciones principales
- 9 programas (CIRUGÍA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo de limpieza automático
- Función de retroalimentación
- Función de sintonización automática
- Función de enlace dinámico

CON DOBLE LUZ

LED



VarioSurg 4
REF. Y1500706

5.899€*
10.349€*

Kit básico H-S Puntas



Kit básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 y soporte de puntas)

NUEVA Punta SG12



POTENCIA **SURG 100%**

SG12

REF. ZT02010001

- Revestimiento de TiN
- Marcas a 6, 8 y 10 mm del filo del filo de la punta
- 18 dientes; 0.35 mm de grosor

NUEVAS

Puntas Maxi Reach



POTENCIA **SURG 80%**

M-RE2

REF. Z305715

- Revestimiento de TiN
- 11 dientes; 0,6 mm de grosor

209€*
281€*



POTENCIA **SURG 80%**

M-ST1

REF. Z305713

- Revestimiento de TiN
- 3 dientes; 0,6 mm de grosor

369€*
509€*



POTENCIA **SURG 80%**

M-OC1R

REF. Z305709

- Revestimiento de TiN
- Marcas a 2 mm del filo
- Punta curvada derecha/izquierda*
- 3 dientes; 0,6 mm de grosor

369€*
509€*



POTENCIA **SURG 80%**

M-OC1L

REF. Z305710

- Revestimiento de TiN
- Marcas a 2 mm del filo
- Punta curvada derecha/izquierda*
- 3 dientes; 0,6 mm de grosor

369€*
509€*

Pack Puntas VarioSurg



Puedes descargar en PDF el Catálogo de Puntas:



OFERTA


2 + 1

Puedes elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo. Descuento equivalente al valor de la punta más barata.

[Oferta no aplicable a kits de puntas y puntas Maxi Reach]

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

DOS DISPOSITIVOS. UNA SOLUCIÓN. POTENCIAL ILIMITADO

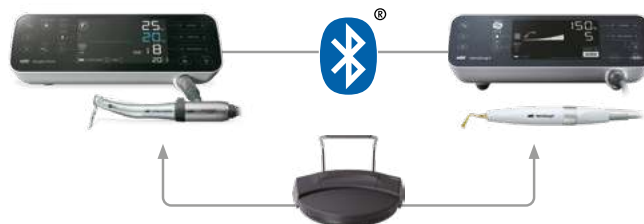

El desarrollo del sistema de cirugía ósea por ultrasonidos VarioSurg continúa con la introducción de VarioSurg 4. Con tecnología ultrasónica pionera de alta potencia y una variada gama de puntas para diversos procedimientos, el VarioSurg 4 permite una extracción y conformación ósea rápida y compleja.

Minimiza el daño a los tejidos blandos circundantes y reduce la invasividad en comparación con las sierras óseas y convencionales. Con nuevas ventajas como la integración del mando de pedal inalámbrico, la compatibilidad con Surgic Pro2, y un diseño refinado y elegante, el VarioSurg 4 está preparado para superar las expectativas de los clínicos y crear un entorno sin estrés.

**COMPRA YA
PAGA LUEGO**



SOLO **999,90€** /MES

OFERTA 1

* Paga durante 10 meses *sin intereses*

Sistema de Cirugía Ultrasónica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712



+ Micromotor para Implantología
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



+ Contra-ángulos con luz (Reducción 20:1)**
X-SG20ML x2 REF. CA13030001



+ Carrito de soporte para ambos sistemas
iCart Duo REF. S9090



+ Dispositivo de monitorización de osteointegración
Osseo 100+ REF. Y1004176



9.999€*
23.563€*

**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

**COMPRA YA
PAGA LUEGO**



SOLO **951,90€** /MES

OFERTA 2

* Paga durante 10 meses *sin intereses*

Sistema de Cirugía Ultrasónica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712



+ Micromotor para Implantología
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



+ Contra-ángulos con luz (Reducción 20:1)**
X-SG20ML x2 REF. CA13030001



+ Stand de soporte para ambos sistemas
Link Stand3 REF. ZA16230001



+ Dispositivo de monitorización de osteointegración
Osseo 100+ REF. Y1004176



9.519€*
22.100€*

**1 contra-ángulo de serie + 1 contra-ángulo adicional del mismo modelo

Piezas de Mano



Sin Luz 1:1

SGS-ES
REF. H264

479€*
664€*

Con Luz 1:1

X-SG65L
REF. H1009

959€*
1.348€*



Sin Luz 1:1

X-SG65
REF. H1038

579€*
804€*



Con Luz

X450L
REF. P1078

- Sólo para fresas de 25 mm de largo
- Disponible en todas las conexiones

849€*
1.187€*



Sin Luz 1:2

SGS-E2S
REF. H266

979€*
1.364€*



Sin Luz 1:1

SGA-ES
REF. H263

- Ángulo de 20°
- 829€***
1.158€*



Sin Luz 1:2

SGA-E2S
REF. H265

- Ángulo de 20°
- 1.059€***
1.481€*

Piezas de Mano

MICROSIERRAS



Reciprocidad 1,8 mm

Sin Luz 3:1

SGR2-E
REF. SH162

1.289€*
1.813€*



3° Sagital

Sin Luz 3:1

SGT2-E
REF. SH163

1.609€*
2.262€*



17° Oscilación

Sin Luz 3:1

SGO2-E
REF. SH164

1.739€*
2.440€*

Tubos de Irrigación

Tubos de Irrigación
REF. Y900113

- Juego de 5 tubos

47,79€*
96€*



SURGIC PRO

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg 4

SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



Sin Luz 20:1

SGX-E20R

REF. HA1200

- Velocidad máx.: 2,000 min⁻¹
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y pterigoideos en cirugía maxilofacial/cirugía oral

1.409€*
1.975€*

SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

Contra-Ángulos

REDUCCIÓN 20:1



Con Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

1.179€*
1.649€*



CABEZAL MINI

NUEVO

Con Luz 20:1

X-SG20ML

REF. CA1303

1.179€*
1.649€*



DESMONTABLE

Con Luz 20:1

X-DSG20L

REF. C1068

1.269€*
1.773€*

Sin Luz 20:1

X-DSG20

REF. C1067

1.029€*
1.441€*



Sin Luz 20:1

SG20

REF. C1010

809€*
1.133€*



CABEZAL MINI

NUEVO

Sin Luz 20:1

SG20M

REF. CA1302

809€*
1.133€*



Sin Luz 20:1

SGMS-ER20i

REF. Y110147

- Indicador de profundidad

729€*
1.014€*

Contra-Ángulos

ALTA VELOCIDAD

Con Luz 1:3

X-SG93L

REF. C1004

- Spray triple

1.179€*
1.656€*



Sin Luz 1:3

X-SG93

REF. C1007

- Spray triple

919€*
1.288€*

Con Luz 1:3

Z-SG45L

REF. C1107

- Spray triple
- Cabezal angulado 45°

1.149€*
1.613€*



Sin Luz 1:3

Z-SG45

REF. C1108

- Spray triple
- Cabezal angulado 45°

989€*
1.380€*

Plan Renove NSK

¡Actualiza ahora, tan fácil como 1, 2, 3!

En NSK Dental Spain, estamos comprometidos con ofrecerte las mejores soluciones para que siempre disfrutes de productos modernos, eficientes y sostenibles. Por eso, hemos creado **nuestro Plan Renove**, un programa diseñado para facilitarte la renovación de tus equipos o dispositivos de forma económica y responsable.

Con el **Plan Renove**, puedes entregar tu producto antiguo y beneficiarte de un precio especial al adquirir uno nuevo. Este programa no solo te permite acceder a lo último en tecnología, diseño y funcionalidad, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que gestionamos de manera adecuada el reciclaje o reutilización de los productos que nos entregas.

Con nuestro **Plan Renove**, renovar nunca fue tan fácil, accesible y beneficioso para ti y para el planeta. ¡Descubre lo fácil que es dar el salto a lo nuevo con nosotros!



¿Cómo disfrutar de la oferta?

- 1** Contacta con tu distribuidor de confianza para solicitar la oferta
- 2** Envía tu viejo instrumento a NSK Dental Spain junto con un formulario de información
- 3** Disfruta de nuestro descuento exclusivo

Precisión ilimitada

Velocidad y control de torque extremadamente precisos para garantizar la máxima seguridad durante cada intervención.



Plan Renove NSK

PLAN RENOVE Surgic Pro:

Surgic Pro SIN LUZ

REF. Y1003587

El set completo incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M** no óptico
- Pedal de control **FC-78**
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

INCLUYE CONTRA-ÁNGULO SG20



2.189€*

5.268€*

PLAN RENOVE X-SG20L/SG20:



Con Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

- Cuerpo de titanio con DURAGRIP
- Óptica de vidrio celular
- Porta-fresas Push Button
- Irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidad Máx: 2.000 min⁻¹

779€*

1.649€*



Sin Luz 20:1

SG20

REF. C1010

- Cuerpo de acero inoxidable
- Porta-fresas Push Button
- Irrigación externa e interna (Kirschner y Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidad Máx: 2.000 min⁻¹

579€*

1.133€*

PLAN RENOVE Piezas de Mano Serie Varios

Serie Varios 170, 370, 570, 970 y Varios Combi Pro

La serie Varios incorpora los últimos avances en tecnología piezoeléctrica. El motor iPiezo de NSK garantiza una salida estable al ajustarse automáticamente a la frecuencia óptima según la carga de la punta.

Las piezas de mano de la serie Varios mejoran significativamente el acceso a la cavidad oral, permitiendo al operador trabajar con mayor eficiencia.

VA2-LUX-HP

REF. E351050

599€*

1.152€*



VA2-HP

REF. E350050

379€*

657€*



Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

32

razones para elegir el
Varios Combi Pro2

¿Quieres probar la calidad del Varios Combi Pro2? Ponlo a prueba en tu clínica con una demostración gratuita.



Escanea el código QR para más información

NUEVO




CARACTERÍSTICAS



Ultrasonidos

El Varios Combi Pro2 cuenta con la primera pieza de mano ultrasónica de titanio puro, resistente al calor y a productos químicos. Incorpora el acabado antideslizante DURAGRIP para un agarre seguro y ofrece comodidad, durabilidad y alto rendimiento.

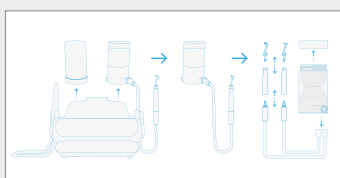

Unidad y cámaras independientes

Con el Varios Combi Pro2, las líneas de polvo están separadas del cuerpo principal. En caso de obstrucción, el usuario puede desmontar fácilmente las piezas sin necesidad de enviar el equipo a reparar. Así, tu práctica sigue funcionando sin interrupciones.



Sistema de calentamiento de agua

El Varios Combi Pro2 calienta el agua para el escarificador y las piezas de mano, ofreciendo mayor confort al mantener una temperatura agradable para todo tipo de pacientes, incluso sensibles.



Pedal de control inalámbrico multifunción

Coloca el pedal donde prefieras sin cables ni límites: el Varios Combi Pro2 se conecta por Bluetooth® para un control cómodo, libre y eficiente durante el tratamiento.



Auto-Cleaning

(Limpieza Automática)

El Varios Combi Pro2 ofrece cuatro modos de autolimpieza que mantienen el equipo limpio, evitan obstrucciones y eliminan la necesidad de herramientas adicionales.



Modo CLM

La limpieza del circuito de agua del Varios Combi Pro2 es fácil con la solución b.clean y el modo CLM, cumpliendo los requisitos europeos. Además, el equipo se bloquea automáticamente hasta que la solución química se haya drenado por completo.



Boquilla Jet para pieza de mano de aeropolido

En respuesta a las necesidades clínicas, hemos desarrollado una boquilla de chorro (Jet Nozzle) para la pieza de mano Perio, diseñada para tratamientos supragingivales. Esta nueva boquilla permite dirigir el tratamiento con mayor precisión y es intercambiable con la boquilla Perio convencional según la aplicación requerida.



iCart Prophecy2 con kit de botella de agua

Nuestro carrito ofrece comodidad y facilidad de uso, con opción de suministro de agua independiente para usar el Varios Combi Pro2 incluso donde el agua escasea o no es de buena calidad.

Higiene Bucal

Varios Combi Pro2

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

Contenido:

- Unidad de control Varios Combi Pro2
- Pieza de mano ultrasonidos VA2-LUX-HP-Ti
- Manguera ultrasonidos VA2-LUX-HP-Ti
- Depósito Prophy
- Manguera Prophy
- Pieza de mano para aeropulido (Prophy)
- Pedal de control inalámbrico
- Soporte
- Manguera de aire
- Manguera de agua
- Cable de red
- Set de botellas de irrigación
- Set CLM
- Puntas ultrasonidos: G8, G16 y P20
- Polvo FLASH pearl (300 g)

Especificaciones:

- Dimensiones: A 249 × P 290 × Al 215 mm (sin los depósitos)
- Peso: 3.5 kg
- Fuente de alimentación: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Frecuencia de trabajo (ultrasonidos): 28 - 32 kHz
- Potencia máxima (ultrasonidos): 11 W

**COMPRA YA
PAGA LUEGO**

* Paga durante 10 meses sin intereses



SOLO **589,90€** /MES

VARIOS COMBI PRO2

Dispositivo para
Tratamiento Periodontal

Varios Combi Pro2

REF. Y1500505



Tratamiento
Periodontal Subgingival

Kit Perio

REF. Y1500470



Para pieza de mano Perio

Boquilla Jet

REF. TA10770106



5.899€*
9.789€*



**COMPRA YA
PAGA LUEGO**

* Paga durante 10 meses sin intereses



SOLO **181,90€** /MES

ICART PROPHY2

Carrito de soporte

iCart Prophy2

REF. S9898



Para iCart Prophy2

Kit botella de agua

REF. Y1500719



Solución desinfectante

b.clean

REF. BCL600



1.819€*
3.042€*



Higiene Bucal

FLASH pearl

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL

Polvo de limpieza con perlas de calcio, FLASH pearl.
Para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente.



CARACTERÍSTICAS

- Ingrediente principal: carbonato cálcico, eficaz contra manchas y decoloraciones (incluso resistentes)
- No contiene sodio, por lo que no deja sabor salado y es apto para dietas bajas en sodio
- Gránulos esféricos suaves con el esmalte dental
- Sin sabor, vegano y sin flúor
- Tamaño medio de las partículas de 54 micras
- 4 frascos de 300 g

FINALIDAD DE USO

- Manchas intensas
- Sólo para aplicación supragingival

FLASH pearl
REF. Y900698

86€*
~~134€*~~

SOFT pearl

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL

Polvo de limpieza con glicina, SOFT pearl.
Eficaz contra manchas y decoloraciones, especialmente leves y moderadas.



CARACTERÍSTICAS

- Contiene glicina, un aminoácido proteico
- Elimina manchas y decoloraciones, sobre todo leves a moderadas
- Apto para uso con separadores de amalgama y en dientes de leche
- Reduce la necesidad de pulido posterior
- Sabor neutro y agradable
- Vegano y sin flúor
- Tamaño medio de las partículas 65 micras
- 4 frascos de 250 g

FINALIDAD DE USO

- Manchas y decoloraciones medias y ligeras
- Sólo para aplicación supragingival

SOFT pearl
REF. Y1500721

109€*
~~170€*~~

Perio Mate Powder

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUB Y SUPRAGINGIVAL

Polvo de limpieza Perio-Mate Powder
Para uso supra y subgingival, con un resultado perfecto.



CARACTERÍSTICAS

- Contiene glicina, un aminoácido proteico
- Presenta menor dureza Mohs que la dentina
- Puede utilizarse en dientes primarios (dientes de leche)
- Generalmente no requiere pulido posterior al tratamiento
- Sabor neutro, dulce y agradable
- Vegano y sin flúor
- Tamaño medio de las partículas de 25 micras
- 2 frascos de 160 g

FINALIDAD DE USO

- Eliminación de biofilm, decoloraciones leves y manchas suaves
- Para aplicación sub y supragingival

Perio-Mate Powder
REF. Y900938

69€*
~~96€*~~

Higiene Bucal

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE AEROPULIDO

- Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina. (No incluye conexión directa a manguera M4 y B2)
- Acoplamiento sencillo e instantáneo
- Diseño ligero y flexible



Sistema de blanqueamiento dental
Prophy-Mate neo

+ 2ª Pieza de Mano
Pieza de Mano Larga REF. T797010

+ FLASH pearl (4 frascos de 300 g)
FLASH pearl REF. Y900698

999€*
2.061€*



ROTACION FÁCIL
Y FLUIDA DE 360°

PROPHY-MATE NEO: TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Acoplamiento
sencillo e
instantáneo



Boquillas fácilmente
desprendibles con
puntas de 60° y 80°




Con las boquillas
gemelas originales de
NSK se logra una mayor
potencia de pulido

PERIO-MATE: TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Boquilla innovadora

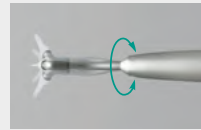

Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen
de flujo de polvo

Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM SUPRA Y SUBGINGIVAL

- Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina. (No incluye conexión directa a manguera M4 y B2)
- Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis
- La pieza de mano gira 360°



Eliminador de película biológica
Perio-Mate

+ 2ª Pieza de Mano
Pieza de Mano Perio-Mate REF. T1043010

+ Perio Mate Powder (2 frascos de 160 g)
Perio Mate Powder REF. Y900938

999€*
2.292€*



GIRO FÁCIL Y
FLUIDO DE 360°

Higiene Bucal

Varios 970

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz

Con Luz

VA970 LED
REF. Y1004161

1.779€*
~~3.345€*~~

Sin Luz

VA970
REF. Y1004160

1.539€*
~~2.887€*~~

iPiezo engine®



Varios 370

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - G · General
 - E · Endo
 - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16

Sin Luz

VA370
REF. Y1001340

799€*
~~1.484€*~~

iPiezo engine®

CUERPO PORTÁTIL
ULTRA COMPACTO



NUEVO

Piezas de Mano Serie Varios

PIEZAS DE MANO ULTRASÓNICAS DE TITANIO

La pieza de mano Varios2 es la primera pieza de mano ultrasónica del mundo fabricada en titanio puro, un material resistente al calor y a los productos químicos, capaz de soportar múltiples reprocesamientos y esterilizaciones en autoclave.

Además, para asegurar un agarre firme y estable, la pieza de mano cuenta con el reconocido acabado DURAGRIP, utilizado en la gama premium de piezas de mano NSK.

Este ultrasonidos elegante, duradero, bien equilibrado y ligero ofrece una comodidad excepcional y un rendimiento duradero.

VA2-LUX-HP-Ti

REF. EA1203X050

899€*
~~1.266€*~~



* Compatible con Varios Combi Pro2, Varios 970 LED y Varios 170 LED

VA2-HP-Ti

REF. EA1425X050

599€*
~~836€*~~



* Compatible con Varios 970 y Varios 170

Puntas Varios



Descarga aquí el
catálogo de puntas
ultrasónicas de NSK:



OFERTA 1 + 1

Por la compra de cualquier
punta **Varios** recibirás otra
del mismo modelo



Higiene Bucal

iProphy

PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

MAYOR SEGURIDAD, MAYOR CAPACIDAD

Sin pedal de control, iProphy inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión. Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

iProphy

REF. Y1500015

799€*
1.701€*



Contra-Ángulos

REDUCCIÓN 4:1



Sin Luz 4:1

X55

REF. C618

- Cuerpo de titanio macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de agua simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

619€*
871€*



NUEVO

Sin Luz 4:1

FX55m

REF. CA1316

- Velocidad máx: 10 000 min⁻¹
- Para puntas EVA / Profin / Orthofile
- Cuerpo de acero inoxidable
- Movimiento recíproco vertical (longitud de carrera 1,4 mm)

359€*
497€*



NUEVO

Sin Luz 4:1

FX50m

REF. HA1205

- Velocidad máx: 2.500 min⁻¹
- Cabezal Prophy desechable
- Cuerpo de acero inoxidable

339€*
465€*



Sin Luz 4:1

FX57m

REF. C1054

- Cuerpo de acero inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

289€*
406€*



NUEVO

Sin Luz 4:1

FX58m

REF. CA1321

- Velocidad máx: 2.500 min⁻¹
- Para copas y cepillos atornillables
- Cuerpo de acero inoxidable
- Rotación de 360°

319€*
437€*

Escarificadores

Con Luz

S970L

REF. T1005

- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

839€*
1.569€*



Sin Luz

S970

REF. T1020

- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

689€*
1.286€*



Con Luz

S970KL

REF. T1013

- Conexión directa a los acoplamientos KaVo®
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz

919€*
1.714€*



Sin Luz

AS2000 M4

REF. T698

- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz

309€*
660€*



NSK Academy ofrece formaciones teóricas y prácticas (hands-on) centradas en nuestros productos, sus aplicaciones clínicas y su integración en la práctica diaria. Nuestros cursos cuentan con profesionales de reconocido prestigio y amplia experiencia clínica, que comparten protocolos, conocimientos y casos reales.

En NSK no solo desarrollamos productos de alta calidad: también acompañamos a los profesionales mediante formación especializada y soporte continuo. Además, colaboramos con clínicas, distribuidores, universidades y sociedades científicas para desarrollar programas formativos adaptados a sus necesidades.

Lleva tu práctica clínica al siguiente nivel. Escanea el código QR y descubre las próximas formaciones de NSK Academy.



Terapia Mínimamente Invasiva



Minimally Invasive Therapy

El concepto M.I.T. de NSK se basa en los más altos estándares para el tratamiento de la periodontitis. Está fundamentado en las guías clínicas S3 de la EFP (Federación Europea de Periodoncia) y sitúa al paciente en el centro de la atención. Este enfoque moderno permite llevar a cabo un tratamiento preciso, planificable y basado en la evidencia científica para la periodontitis en estadios I-III.

Este enfoque garantiza un tratamiento eficaz y basado en la evidencia a través de tres pilares fundamentales:

- Evaluación exhaustiva del paciente
- Tratamiento basado en la evidencia científica
- Motivación y compromiso del paciente




NSK te ayuda a ser tu mejor versión.

FUENTES Y REFERENCIAS:

El protocolo de trabajo MIT está basado en: "Treatment of Stage IV Periodontitis: The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline." Journal of Clinical Periodontology 49 Suppl 24 (S24) - Herrera, David, Sanz, Mariano, Kebschull, Moritz et al. 2022.

El servicio hace la diferencia

Servicio Técnico Oficial NSK Dental Spain

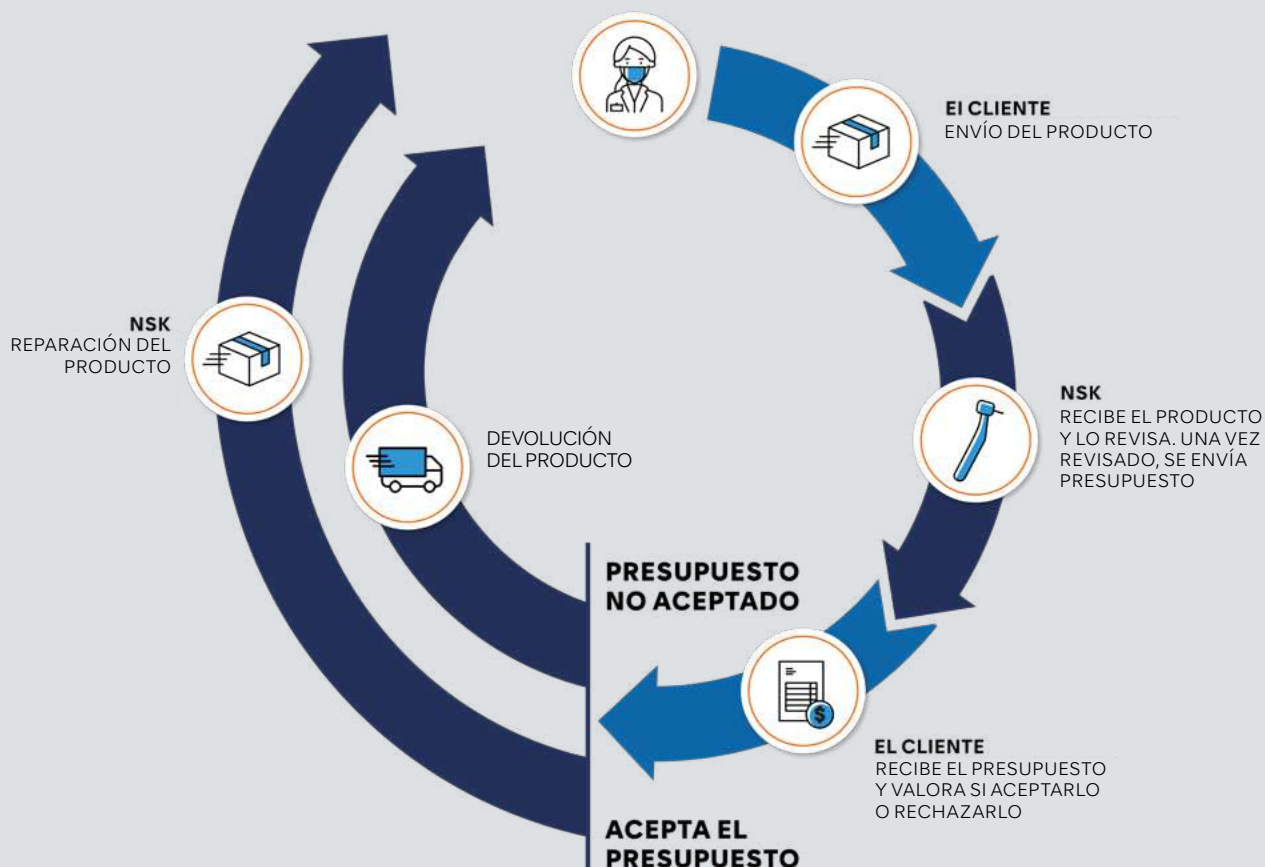

¿Cuáles son las ventajas del Servicio Técnico Oficial de NSK Dental Spain?

Los productos de NSK van más allá de ser meros instrumentos de trabajo eficientes y fiables; representan una síntesis avanzada de tecnología e innovación. Cada profesional los percibe y utiliza como una extensión natural de sus propias manos y habilidades. Por esta razón, tratamos cada operación de mantenimiento con el máximo cuidado.

Pero, ¿qué implica concretamente optar por el Servicio Técnico Oficial de NSK Dental Spain?



VELOCIDAD

En las horas siguientes a la confirmación del presupuesto el producto se repara en 24/48 horas.



PROFESIONALIDAD

Confía sus herramientas a un equipo experimentado y cualificado que conoce a fondo todos los productos NSK y sabe cómo garantizar que funcionen como nuevos.



FIABILIDAD

Puedes estar seguro de que solo se utilizan recambios originales. Los productos NSK poseen una mecánica impecable gracias a un exhaustivo trabajo de I+D. Desconfía de las imitaciones y de los productos de baja calidad!



SEGURIDAD

Original significa seguro en todos los aspectos: el uso de piezas no originales implica la pérdida de la certificación de dispositivo médico y la anulación de la garantía. Optar por el servicio postventa de NSK es un gesto de cuidado hacia los pacientes y una ventaja para los dentistas que lo eligen.



Escanea el código QR para más información

☎ +34 91 626 61 28 | +34 678 72 50 15

✉ sat@nsk-spain.es

📍 C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja,
Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España

Endodoncia

Kit Endodoncia

Localizador de ápice
iPex II REF. Y1002208

+ Micromotor
Endo-Mate DT2 REF. Y1004230

+ Cabezal
MPAS-F20R REF. Y110046

1.909€*
4.003€*




Piezas de mano



Sin Luz **20:1**
MPAS-F20R
REF. Y110046

- Para motores Endo-Mate + iPexII
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Rotación 360°
- Conexión para localizador de ápice

429€*
589€*



Sin Luz **128:1**
EX-Endo
REF. C592001

- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Rotación de 360°
- Cabezal excepcionalmente pequeño
- Porta-fresas Push Button

559€*
784€*



Sin Luz **128:1**
Ti-Endo
REF. C589001

- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Rotación de 360°
- Cabezal excepcionalmente pequeño
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm

869€*
1.215€*



NUEVO
Sin Luz **16:1**
FX70m
REF. CA1325

- Velocidad máx: 2.500 min⁻¹
- Para limas manuales / giro de 60°
- Cuerpo de acero inoxidable
- Porta-fresas Push Button

409€*
571€*



NUEVO
Sin Luz **16:1**
FX74m
REF. CA1320

- Velocidad máxima: 2.500 min⁻¹
- Giro de 80°
- Cuerpo de acero inoxidable
- Porta-fresas Push Button

409€*
571€*



NUEVO
Sin Luz **16:1**
FX75m
REF. C1055

- Velocidad máx: 2.500 min⁻¹
- Rotación de 360°
- Cabezal miniatura
- Cuerpo de acero inoxidable
- Porta-fresas Push Button

419€*
586€*



Sin Luz **10:1**
Ti-Max X35
REF. C624

- Contra-Ángulo sin Luz
 - Reducción 10:1
 - Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
 - Velocidad máxima 4.000 min⁻¹

669€*
942€*



Con Luz **10:1**
Ti-Max X35L
REF. C620

- Contra-Ángulo con Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min⁻¹

999€*
1.394€*

Endodoncia

Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

ENDO-MATE DT2

REF. Y1004230

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

999€*
2.070€*



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

iPexII

REF. Y1002208

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador SmartLogic de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

679€*
1.344€*



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

Endo-Mate TC2

REF. Y1001027

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

1.049€*
1.911€*



Equipo Dental Móvil

VIVA MATE G5

MICROMOTOR PORTÁTIL CON LUZ

Con Luz

VIVAMATE G5

REF. Y1002801

- Velocidad: 3.000~30.000 min⁻¹
- Peso: 148g(cable incluido)
- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Compatible con contra-ángulos y piezas de mano rectas

1.699€*
2.367€*



VIVAace

GABINETE DENTAL LIGERO

Con Luz

VIVAace

REF. Y1003773

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg

Contenido:

- Set básico VIVAace
- Kit de micromotor VIVAace
- Kit de escarificador VIVAace

8.399€*
16.526€*



Laboratorio

VOLVERE i7

MICROMOTOR ESTÁNDAR

VOLVERE i7 representa un nuevo hito de NSK en su constante esfuerzo por poner a disposición de los protésicos dentales sus micromotores de laboratorio de renombre mundial. VOLVERE i7, de diseño elegante y compacto, incluye todas las características esenciales para un laboratorio dental con una excelente relación calidad-precio.

VOLVERE i7

REF. Y1002890

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

929€*

1.877€*



ULTIMATE XL

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

SUAVIDAD Y POTENCIA SIN PRECEDENTES

El líder mundial en micromotores de laboratorio se supera una vez más. La gama Ultimate evoluciona para ofrecer mayor suavidad de movimiento y más potencia. Gracias a su sistema de control vectorial de 180°, garantiza un trabajo más eficiente y preciso. Su pieza de mano, diseñada con criterios de ergonomía y funcionalidad, reduce el cansancio y facilita el trabajo, incluso en las aplicaciones más delicadas y durante largas jornadas. La nueva generación Ultimate XL lleva el rendimiento a un nuevo nivel.

ULTIMATE XL TORQUE

REF. Y141471

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.559€*

2.602€*

ULTIMATE XL COMPACT

REF. Y141472

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.359€*

2.602€*



PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA SIN LUBRIFICACIÓN

Sin Luz

PRESTO II

REF. Y150022

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

679€*
~~1.266€*~~



PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

Sin Luz

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.349€*
~~2.530€*~~



PRESTO AQUA LUX

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

Con Luz

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151


- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.769€*
~~3.308€*~~



RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN

Para cualquier duda o consulta sobre los productos de NSK Dental Spain, puede contactar con su delegado comercial más cercano.

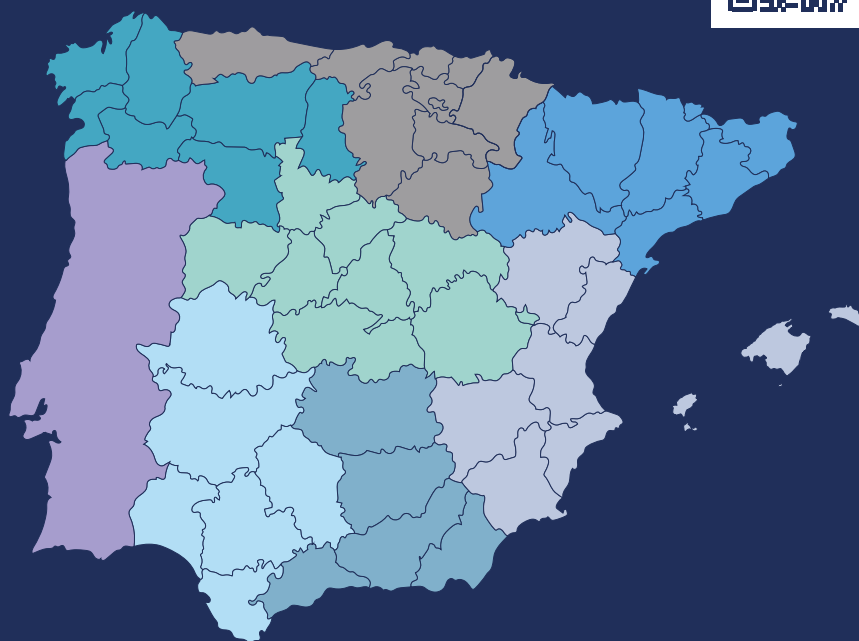

EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

Miguel Ángel Toribio

Responsable de Implantología

✉ toribio@nsk-spain.es
☎ +34 661 36 58 91

María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas

✉ suarez@nsk-spain.es
☎ +34 636 79 64 64

Patrícia Ferreira

Especialista en Higiene Bucal

✉ ferreira@nsk-spain.es
☎ +351 911 553 969

Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia y León

✉ portela@nsk-spain.es
☎ +34 645 42 69 12

Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja,
Cantabria, Burgos, Soria y Asturias
✉ miguelgonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 92 21

Xavier Sentís

Cataluña, Huesca y Zaragoza

✉ sentis@nsk-spain.es
☎ +34 650 29 11 46

Óscar Llorente

Comunidad Valenciana, Murcia,
Islas Baleares, Albacete y Teruel
✉ llorente@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 03

Ana González

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,
Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid
✉ anagonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 603 64 78 06

Leonardo Pascual

Málaga, Granada, Jaén, Almería,
Ciudad Real, Ceuta, Melilla e Islas
Canarias
✉ pascual@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Córdoba, Cádiz, Sevilla, Huelva y
Extremadura
✉ gibbah@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 93 50

João Paulo Costa

Portugal

✉ costa@nsk-spain.es
☎ +351 915 66 32 32

MANTENTE INFORMADO, MANTENTE CONECTADO.
ENCUENTRANOS EN:



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España
tel: +34 91 626 61 28 - +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es

Los precios no incluyen IVA. Ofertas limitadas hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta fin de existencias.